




تحليل النشا التالف SD-A

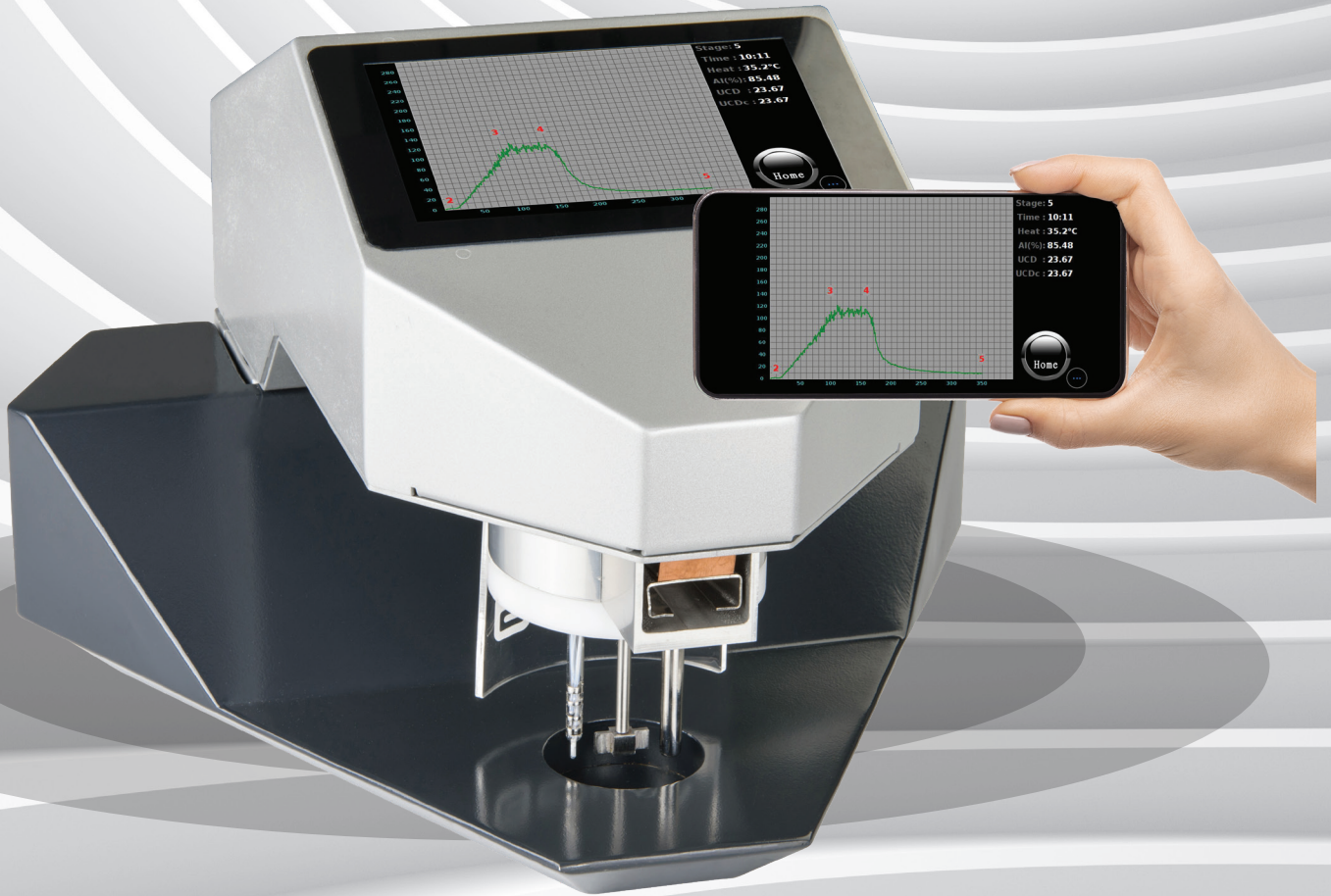

اختر الأفضل

تحليل النشا التالف SD-A

- SD-Analyzer مثالي لتحليل النشا التالف في الدقيق
- يتم استخدامه لتحديد كمية النشا التالف في الدقيق
- طريقة قياس التيار
- يوفر لنا التصميم الفريد وشاشة اللمس متعددة الوظائف سهولة الاستخدام
- شاشة ملونة 7 بوصة تعمل باللمس
- 3 موضوعات للشاشة
- يعتمد العمل الممارس على امتصاص اليود في تعليق دقيق مخفف. كلما زاد ضرر النشا ، زادت سرعة امتصاص اليود
- تطبيق انزيم مجاني
- يوفر الجهاز نتائج بسيطة وسريعة وموثوقة فقط مع 1 جرام من عينة الدقيق وفي أقل من 10 دقائق
- إمكانية الوصول إلى شاشة الجهاز من الهاتف المحمول باستخدام تطبيق الهاتف المحمول
- معايرة سهلة
- شاشة النتائج في طرق A UCD و F AACC و Farrand و Audidier

يستخدم ل

التحقق من شروط القوائم
تعديل امتصاص الماء ولزوجة العجين
تحسين الحجم واللون والعمر الافتراضي للمنتج النهائي

تحديد

متطلبات الطاقة
الحجم (W x D x H)
الوزن الصافي
عرض

110 فولت - 60 هرتز أو 220 فولت - هرتز (حدد حسب الطلب)
39 x 39 x 26 سم
7 كجم
شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات